

**ELIMINATING WATER?
CHILD'S PLAY!**



Clinical
Addition Silicones

Hydrorise, ***l'innovation qui n'existait pas.***

***ZHERMACK présente HYDRORISE,
le Silicone A qui s'adapte à tout type d'empreinte
dans toutes les conditions cliniques,***

puisqu'il permet d'associer plusieurs viscosités en fonction d'un cas spécifique
et de choisir le temps de prise correct pour chaque méthodologie de travail.

***Les performances exclusives d'HYDRORISE
proviennent d'une nouvelle technologie
qui s'appelle "hyper-hydrophilie",
capable d'augmenter la fluidité du silicone
en améliorant sensiblement la définition de l'empreinte.***



HYDRORISE est un nouveau matériau d'empreinte, précis et fiable, qui a été conçu en réponse aux exigences des dentistes.

Parfait, comme le sourire de vos patients.



Hyperhydrophilic technology: au-delà de l'hydrophilie.

Hyper-hydrophilie

La technologie exclusive développée par la recherche ZHERMACK fait d'HYDRORISE un produit en affinité parfaite avec l'eau, comme aucun autre matériau présent sur le marché.

< 10°

Angle de contact inférieur à 10°

Plus l'angle de contact est bas plus le pouvoir mouillant du matériel est élevé puisque cela **permet au silicone de s'adapter à toute sorte de morphologie dentaire.**

Système AMDA (Advanced Moisture Displacement Action)

Ce système assure une reproduction précise des détails présents dans un milieu humide comme la bouche et renforce la capacité de déplacement des fluides présents à l'intérieur du sillon, **pour garantir une intégrité parfaite des marges de l'empreinte.**

Un travail fiable, pour le dentiste et pour le patient.

La synergie des propriétés physiques et mécaniques d'HYDRORISE garantit chaque fois un succès clinique.

Thixotropie

C'est la capacité du silicone de ne pas couler une fois positionné et de glisser quand il est soumis à pressions.

C'est pour cela que HYDRORISE ne coule pas de sa préparation ou dans la bouche du patient.



Résistance au déchirement

HYDRORISE est extrêmement élastique, surtout en présence de contre-dépouilles.

Le matériau ne se déchire pas et l'empreinte n'est pas déformée lors de sa desinsertion de la cavité orale.

Des solutions personnalisées pour le choix du dentiste.

HYDRORISE est étudié pour associer différentes viscosités selon chaque méthode de travail.


Matériau	Double Empreinte	Empreinte Simultanée	Empreinte Monophase
PUTTY			
HEAVY BODY			
MONOPHASE			
REGULAR BODY			
LIGHT BODY			
EXTRA LIGHT BODY			

Toutes viscosités sont disponibles en NORMAL SET (temps de travail 2' - temps de prise 5' 30") et FAST SET (temps de travail 1' 30" - temps de prise 4').

Hydrosystem: *des résultats optimaux, toujours.*

ZHERMACK offre la possibilité d'associer **HYDRORISE** au système innovateur **HYDROSYSTEM**, le nouveau conditionneur qui valorise les surfaces des préparations en créant les conditions idéales pour l'utilisation d'**HYDRORISE** sur dentine, émail, tissus gingivaux, céramiques dentaires, alliages et composites

HYDROSYSTEM permet de prendre des **empreintes précises même dans des situations difficiles**, tout en garantissant un protocole d'utilisation simple et clair.

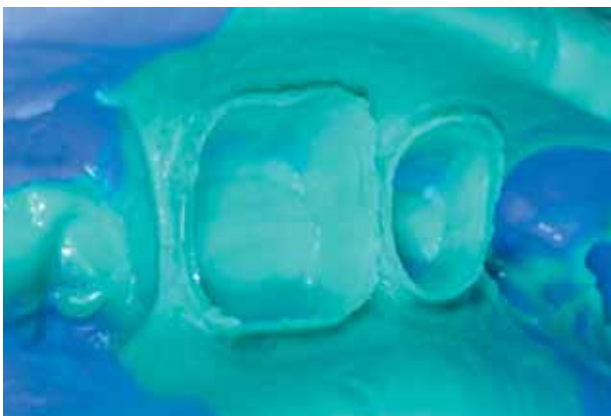

Appliqué sur la préparation avant la prise d'empreinte, **HYDROSYSTEM améliore l'angle de contact ce qui augmente le pouvoir mouillant** du matériau sur la surface des dents: le glissement du silicone vers les zones plus profondes du sillon gingival est ainsi facilité.

Avec **HYDROSYSTEM** il est possible de prétraiter la surface dentaire en améliorant la qualité du résultat final.

Avantages

- Crée une surface idéale sur la préparation, **et réduit les risques de répétition de la prise d'empreinte.**
- Réduit l'angle de contact sur tout type de surface orale.

Hydrorise et Modulmix: l'excellence d'une association parfaite.

Le système HYDRORISE est complété par le nouveau mélangeur automatique MODULMIX et les cartouches en rapport 5:1, étudiés et breveté par ZHERMACK pour offrir aux professionnels flexibilité et confort.

Modularité

Il est possible de monter plusieurs mélangeurs **MODULMIX** en ligne, *en utilisant différents matériaux en même temps* (putty, heavy body, monophasé, alginate remplacement).



Nouvelle cartouche 5:1

HYDRORISE en format maxi de 380 ml est disponible dans la nouvelle cartouche étudiée pour être associée à **MODULMIX**, compatible avec tous les mélangeurs automatiques 5:1 présents sur le marché.

- Simple à installer et prête à l'usage.
- Nouvel embout dynamique/statique pour un mélange parfait sans surchauffer le matériel et gaspillage réduit de 20%*.
- Nouvelle bague de verrouillage pour un système de fixation rapide et sûr.



*Sources: données internes Zhermack

Double vitesse

En appuyant sur un seul bouton on peut sélectionner la vitesse et *moduler la distribution du matériau selon besoin.*

Design moderne et personnalisable

La ligne compacte et fonctionnelle garantit *des encombrements réduits pour une utilisation sur table ou murale.*

Le vaste choix de couleurs permet *d'insérer MODULMIX dans la décoration du cabinet.*

Qualité de mélange

Le dosage parfait des composants garantit un *mélange homogène sans bulles d'air.*



Conditionnements

C207000	HYDRORISE LIGHT NORMAL SET	2 cartouches de 50 ml + 12 embouts de mélange jaunes
C207001	HYDRORISE LIGHT FAST SET	2 cartouches de 50 ml + 12 embouts de mélange jaunes
C207002	HYDRORISE EXTRA LIGHT NORMAL SET	2 cartouches de 50 ml + 12 embouts de mélange jaunes
C207003	HYDRORISE EXTRA LIGHT FAST SET	2 cartouches de 50 ml + 12 embouts de mélange jaunes
C207004	HYDRORISE REGULAR NORMAL SET	2 cartouches de 50 ml + 12 embouts de mélange rose
C207005	HYDRORISE REGULAR FAST SET	2 cartouches de 50 ml + 12 embouts de mélange rose
C207006	HYDRORISE MONOPHASE NORMAL SET	2 cartouches de 50 ml + 6 embouts de mélange rose
C207007	HYDRORISE MONOPHASE FAST SET	2 cartouches de 50 ml + 6 embouts de mélange rose
C207008	HYDRORISE HEAVY BODY NORMAL SET	2 cartouches de 50 ml + 6 embouts de mélange verts
C207009	HYDRORISE HEAVY BODY FAST SET	2 cartouches de 50 ml + 6 embouts de mélange verts
C207010	HYDRORISE PUTTY NORMAL SET	2 pots (Base + Catalyst) de 300 ml
C207011	HYDRORISE PUTTY FAST SET	2 pots (Base + Catalyst) de 300 ml

Economy Pack

C207012	HYDRORISE PUTTY NORMAL SET	2 pots (Base + Catalyst) de 900 ml
C207013	HYDRORISE PUTTY FAST SET	2 pots (Base + Catalyst) de 900 ml
C207030	HYDRORISE LIGHT NORMAL SET	10 cartouches de 50 ml
C207031	HYDRORISE LIGHT FAST SET	10 cartouches de 50 ml
C207032	HYDRORISE EXTRA LIGHT NORMAL SET	10 cartouches de 50 ml
C207033	HYDRORISE EXTRA LIGHT FAST SET	10 cartouches de 50 ml
C207034	HYDRORISE REGULAR NORMAL SET	10 cartouches de 50 ml
C207035	HYDRORISE REGULAR FAST SET	10 cartouches de 50 ml
C207036	HYDRORISE MONOPHASE NORMAL SET	10 cartouches de 50 ml
C207037	HYDRORISE MONOPHASE FAST SET	10 cartouches de 50 ml
C207038	HYDRORISE HEAVY BODY NORMAL SET	10 cartouches de 50 ml
C207039	HYDRORISE HEAVY BODY FAST SET	10 cartouches de 50 ml

C207040	HYDRORISE MAXI MONOPHASE NORMAL SET	2 cartouches de 380 ml + 15 embouts de mélange dynamico-statiques + 2 bagues de verrouillage + 1 seringue à élastomère + 15 embouts intra-oraux jaunes
C207041	HYDRORISE MAXI MONOPHASE FAST SET	2 cartouches de 380 ml + 15 embouts de mélange dynamico-statiques + 2 bagues de verrouillage + 1 seringue à élastomère + 15 embouts intra-oraux jaunes
C207042	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY NORMAL SET	2 cartouches de 380 ml + 15 embouts de mélange dynamico-statiques + 2 bagues de verrouillage
C207043	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY FAST SET	2 cartouches de 380 ml + 15 embouts de mélange dynamico-statiques + 2 bagues de verrouillage
C207044	HYDRORISE MAXI PUTTY NORMAL SET	2 cartouches de 380 ml + 15 embouts de mélange dynamico-statiques + 2 bagues de verrouillage
C207045	HYDRORISE MAXI PUTTY FAST SET	2 cartouches de 380 ml + 15 embouts de mélange dynamico-statiques + 2 bagues de verrouillage
C207060	HYDRORISE MAXI MONOPHASE NORMAL SET	6 cartouches de 380 ml + 2 bagues de verrouillage + 3 seringues à élastomère + 45 embouts intra-oraux jaunes
C207061	HYDRORISE MAXI MONOPHASE FAST SET	6 cartouches de 380 ml + 2 bagues de verrouillage + 3 seringues à élastomère + 45 embouts intra-oraux jaunes
C207062	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY NORMAL SET	6 cartouches de 380 ml + 2 bagues de verrouillage
C207063	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY FAST SET	6 cartouches de 380 ml + 2 bagues de verrouillage
C207064	HYDRORISE MAXI PUTTY NORMAL SET	6 cartouches de 380 ml + 2 bagues de verrouillage
C207065	HYDRORISE MAXI PUTTY FAST SET	6 cartouches de 380 ml + 2 bagues de verrouillage
C207100	HYDROSYSTEM	1 flacon de 10 ml + 50 pinceaux

Accessoires

C205530	DYNAMIC-STATIC MIXING TIPS	Embouts mélangeurs dynamique-statique (50 pièces)
C205540	MIXING TIP LOCKERS	Bagues de verrouillage (2 pièces)
C202080	MIXING TIPS STANDARD	Embouts mélangeurs verts (48 pièces)
C202070	MIXING TIPS SMALL	Embouts mélangeurs jaunes (48 pièces)

C205500	MIXING TIPS MEDIUM	Embouts mélangeurs rose (48 pièces)
C202090	ORAL TIPS	Embouts intra-oraux jaunes (48 pièces)
C202100	DISPENSER D2	Pistolet-distributeur D2 - 1:1
C700025	UNIVERSAL TRAY ADHESIVE	- 1 flacon de 10 ml
C207110	Zhermack seringue à élastomère	

Matériels

C309030	MODULMIX	Mélangeur automatique 230V
C309031	MODULMIX	Mélangeur automatique 230V UK
C309035	MODULMIX	Mélangeur automatique 115V

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 11
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661-4195
Tel. +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
Fax +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK and Ireland
Tel. +44 - (0) 7870 690811
uk@zhermack.com

Spain
Tel. 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

France
Tel. 0800 - 915083
info.france@zhermack.com

Russia
Tel. +7 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

Mexico and Central America
Tel. +52 - 1 - 55 - 91980497
info.mexico@zhermack.com

South America
Tel. +57 - 310 - 2601777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 - Fax +39 - 0425 53596 - info@zhermack.com - www.zhermack.com