

# un beau **SOURIRE**, simplement et facilement

le système de restauration logique et innovant  
conçu onçu pour gagner du temps, à chaque fois



**SDI**

Your Smile. Our Vision.

## Comment la composition de la dent en détermine sa couleur.


- Étant donné que la couleur de la dent est déterminée par la dentine, et non l'émail, la teinte de la dentine joue un rôle majeur dans la détermination de la couleur générale de la dent.
- L'émail est relativement translucide mais nécessite un degré élevé de polissage.

### La dentine est responsable de 95 % de la couleur de la dent<sup>1</sup>

- Opacité unique
- Saturation de nuance
- Fluorescence

### L'émail est responsable de 5 % de la couleur de la dent<sup>1</sup>

- Translucidité
- Légère nuance
- Opalescence

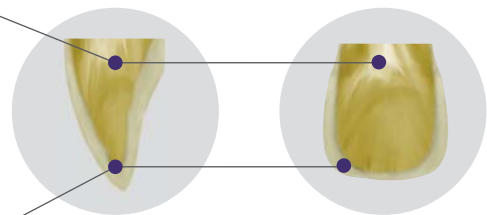


## Aura – comment une échelle linéaire permet une approche facile du processus de sélection de la couleur de la dent.

Aura est le résultat de cinq années de collaboration avec des experts internationaux des matériaux et de la restauration de la dent.


- Presque toutes les dentines ont une "nuance" similaire, située dans la gamme rouge-brun-jaune.
- Aura se concentre là où les couleurs des dents varient, le "Chroma".
- Le chroma mesure la force ou la faiblesse d'une couleur (nuance) et est mesurée en % de saturation.


Cet agencement linéaire et scientifique apporte prévisibilité et simplicité lors de la personnalisation des nuances.

### L'ARRANGEMENT ÉQUIDISTANT ET SUR UN LARGE SPECTRE DES NUANCES DU CHROMA PAR AURA ASSURE LA PRÉVISIBILITÉ

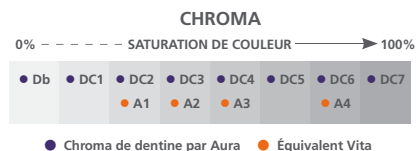

### AURA EST LE SEUL ARRANGEMENT D'OPACITÉS UNIQUES

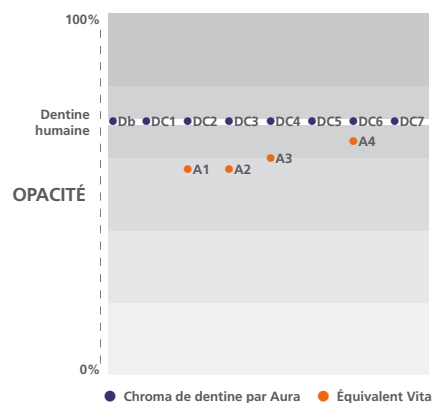

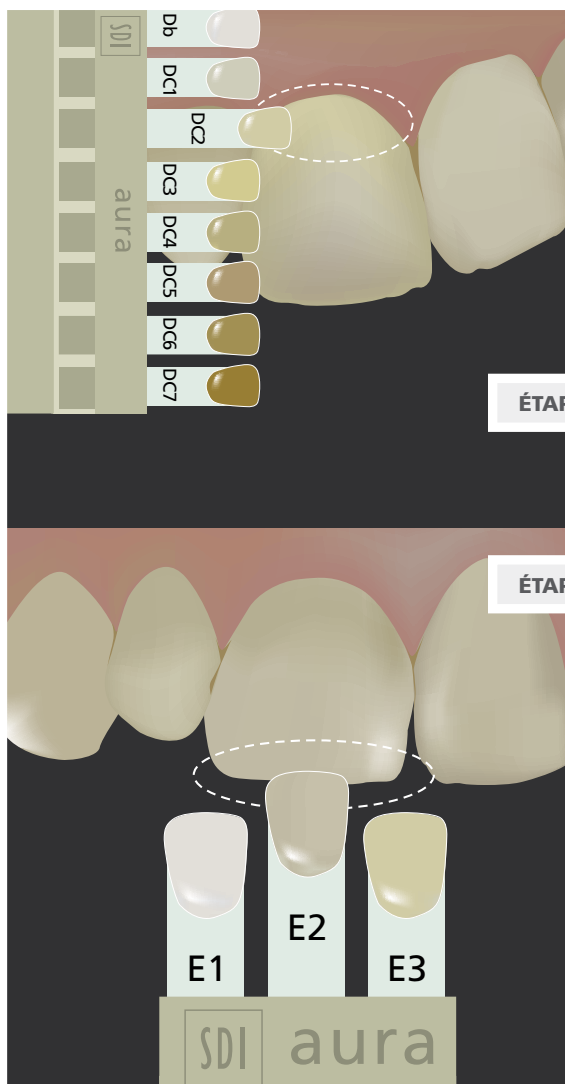

ÉTAPE 1

## Aura – une approche facile pour identifier et apparier la couleur des dents.

Puisque la couleur générale de la dent est déterminée par la dentine, et non par l'émail, le choix de la nuance de dentine doit être la première priorité.

- ▶ Sélectionnez la **nuance de la dentine** à l'endroit où celle-ci est exposée ou à l'endroit où la zone cervicale de la dent est la plus mince.

ÉTAPE 2

- ▶ Sélectionnez la **nuance de l'émail** à partir du bord incisif des dents voisines de celle à restaurer.

## Aura – une approche simple pour une finition miroir.

L'émail Aura est inséré par micro-remplissage permettant un polissage facile jusqu'à obtenir une finition miroir. Cette finition miroir est conservée indéfiniment.

Choisissez la teinte de l'émail en observant le patient :

- E1 Dents jeunes ou blanchies
- E2 Dents adultes
- E3 Dents seniors




---

## Retrait volumétrique minimal pour une stabilité dimensionnelle maximale.

- Aura allie une nouvelle composition de résine à faible retrait avec un nouveau matériau d'obturation Ultra Haute Densité (UHD).

RETRAIT VOLUMIQUE (%)<sup>2</sup>

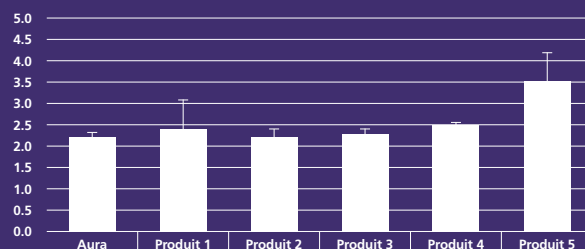

---

## Un bon point pour la haute résistance à la flexion d'Aura

- La résistance à la flexion supérieure d'Aura signifie qu'il a la capacité de résister aux forces de contraintes transmises dans la bouche.

RÉSISTANCE À LA FLEXION (MPa)<sup>2</sup>




---

## L'impressionnante résistance à la compression d'Aura

- La morphologie unique du matériau d'obturation UHD fournit une interface à très haute résistance qui peut résister à des forces de compression élevées.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (MPa)<sup>2</sup>

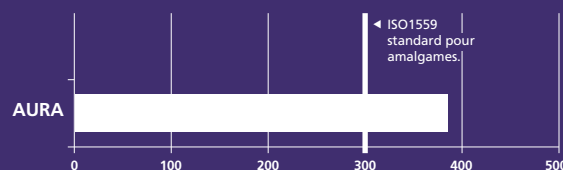

---

## Bulk fill

- Pour les restaurations postérieures rapides où la superposition d'émail n'est pas nécessaire.
- Conçu pour atteindre une grande profondeur de traitement et de résistance.

---


























## Utilisation polyvalente

- Également disponible en 4 teintes chroma à vocations multiples MC2, MC3, MC4 et MC5. Elles sont idéales pour les exigences esthétiques et le remplissage sans stratification.

# Aura, une innovation Australienne.

- Inspiré de la composition et des couleurs naturelles de l'émail et de la dentine.
- Technique simple de stratification permettant de reproduire les couleurs naturelles des dents.
- Degré élevé de polissage et de modelage.
- Conçu pour simplifier le travail du dentiste sur le choix de la teinte.



RÉASSORT	QTÉ	SERINGUES	RÉASSORT	QTÉ	COMPULES
 8565100	8	<b>Kit d'introduction principal d'Aura – Seringues</b> Seringue 4 g (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7)	 8565101	24	<b>Kit d'introduction principal d'Aura - Compules</b> 0,25 g complets (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7)
	3	Seringue 3 g (E1, E2, E3)		24	0,2 g Compules (E1, E2, E3)
	1	Seringue 4 g (Bulk fill)		3	0,25 g Compules (bulk fill)
	2	GUIDE GÉNÉRAL DES NUANCES D'AURA		1	Compules applicator
	2			2	GUIDE GÉNÉRAL DES NUANCES D'AURA
 8565102	3	<b>Kit de démarrage de seringues d'Aura – Clair</b> Seringue 4 g (DC1, DC2, DC4)	 8565103	60	<b>Kit de démarrage de Compules d'Aura – Clair</b> Compules 0,25 g (DC1, DC2, DC4)
	1	Seringue 3 g (E2)		20	Compules 0,2 g (E2)
	1	GUIDE DES NUANCES CLAIRES AURA		1	GUIDE DES NUANCES CLAIRES D'AURA
 8565104	3	<b>Kit de démarrage de seringues d'Aura – Intermédiaire</b> Seringue 4 g (DC1, DC3, DC5)	 8565105	60	<b>Kit de démarrage de Compules d'Aura – Intermédiaire</b> Compules 0,25 g (DC1, DC3, DC5)
	1	Seringue 3 g (E2)		20	Compules 0,2 g (E2)
	1	GUIDE DES NUANCES INTERMÉDIAIRES D'AURA		1	GUIDE DES NUANCES INTERMÉDIAIRES D'AURA
 8565106	4	<b>Kit polyvalent de seringue d'Aura</b> Seringue 4 g (MC2, MC3, MC4, MC5)	 8565107	80	<b>Aura Compules Kit polyvalent</b> Compules 0,25 g (MC2, MC3, MC4, MC5)
	1	GUIDE DES NUANCES MULTI CHROMA D'AURA		1	GUIDE DES NUANCES MULTI CHROMA D'AURA
		<b>Recharges de seringue Aura</b>			<b>Recharges de Compules Aura</b>
 8560011	1	Db – 4 g	 8565011	20	Db – 0,25 g
8560004	1	DC1 – 4 g	 8565004	20	DC1 – 0,25 g
8560005	1	DC2 – 4 g	 8565005	20	DC2 – 0,25 g
8560006	1	DC3 – 4 g	 8565006	20	DC3 – 0,25 g
8560007	1	DC4 – 4 g	 8565007	20	DC4 – 0,25 g
8560008	1	DC5 – 4 g	 8565008	20	DC5 – 0,25 g
8560009	1	DC6 – 4 g	 8565009	20	DC6 – 0,25 g
8560010	1	DC7 – 4 g	 8565010	20	DC7 – 0,25 g
8560012	1	Bulk Fill – 4 g	 8565012	20	Bulk Fill – 0,25 g
8560001	1	E1 – 3 g	 8565001	20	E1 – 0,2 g
8560002	1	E2 – 3 g	 8565002	20	E2 – 0,2 g
8560003	1	E3 – 3 g	 8565003	20	E3 – 0,2 g
8560014	1	MC2 – 4 g	 8565014	20	MC2 – 0,25 g
8560015	1	MC3 – 4 g	 8565015	20	MC3 – 0,25 g
8560016	1	MC4 – 4 g	 8565016	20	MC4 – 0,25 g
8560017	1	MC5 – 4 g	 8565017	20	MC5 – 0,25 g



Your Smile. Our Vision.

Aura est fièrement fabriqué en Australie par SDI Limited Bayswater, Victoria 3153. 1 800 337 033 [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au), Autriche 00800 022 55 734, Brésil 0800 770 1735, France 00800 022 55 734, Allemagne 0800 100 5759, Irlande 01 886 9577, Italie 800 780625, Nouvelle-Zélande 0800 734 034, Espagne 00800 022 55 734, Royaume-Uni 00800 022 55 734, États-Unis et Canada 1 800 228 5166

**Références:** 1. Chu S.J, Devigus A, Paravina R.D, Mielezsko A. J; Fundamentals of Color – Shade Matching and Communications in Esthetic Dentistry; p.89, 2nd Edn.  
2. Données internes, SDI Limited 2014.

Dispositif médical classe IIa, CE0297 DQS Medizinprodukte GmbH. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation. Produits non remboursés par les organismes de santé.



14-04-2014

M100174



+DC36M1001741